
CERAGEM

MASTER V6

사용설명서 | CGM MB-1701

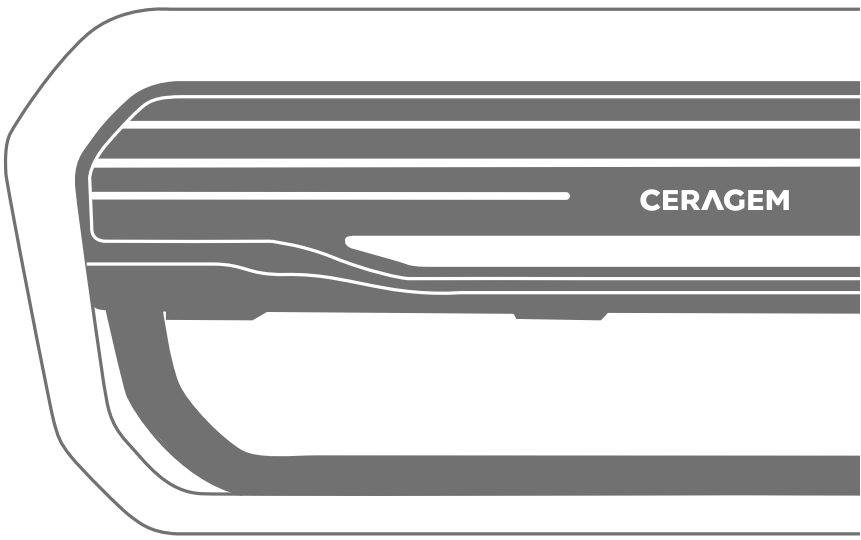

E6N0N10801C 25/06/04

중요안전사항

* 본 제품은 의사의 처방 지도 하에 사용되는 제품으로 추간판탈출증과 퇴행성 협착증 등의 치료에 도움을 주기 위해 견인을 하는 조합형 의료기기입니다.

신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 떨어지거나 경험이나 지식이 부족한 사람들은 그들의 안전에 책임을 지는 보호자의 감독 하에 이 제품을 사용해야 합니다. 어린아이들이 이 제품을 가지고 장난하지 않도록 보호자의 관리가 필요합니다.

이하의 내용은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 것입니다. 사용자께서는 사용 전에 반드시 읽고 올바르게 사용하시기 바랍니다. 중요 안전사항은 "위험" 및 "경고"와 "주의"의 세 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다. 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

⚠ 위 험	표기사항 위반 시 심각한 상해나 사망 가능성이 있으며 그 긴급성이 높은 경우
⚠ 경 고	표기사항 위반 시 중상이나 사망 가능성이 있는 경우
⚠ 주 의	표기사항 위반 시 경미한 상해나 물적 손상 발생 가능성이 있는 경우

⚠ 위 험

전기적 충격을 줄이기 위해 다음 사항을 준수하여 주세요.

1. 본 제품 사용 시 핀이나 다른 금속 물질을 사용하지 마세요.
2. 사용 전 꼭 프레임을 확인하세요.
   (균열, 분열 등의 제품 노화 상태가 보이면 사용을 중단하시기 바랍니다.)
3. 습기 또는 물기가 있는 상태에서는 사용하지 마세요.
4. 복부 진동 도자 사용 시 반드시 도자 커버를 씌워서 도자가 피부에 직접 닿지 않도록 해주세요. (화상의 위험이 있습니다.)
5. 안구(눈동자)의 손상 방지를 위하여 복부 진동 도자를 안구에 직접 대고 사용하지 마세요.
6. 천둥, 번개가 치거나 지진 발생 시 즉시 사용을 중지하고 전원 플러그를 빼주세요.
   (감전 및 화재의 위험이 있습니다.)
7. 케이블 부분을 잡아당겨 뽑거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
   (감전 및 화재의 위험이 있습니다.)

중요안전사항

경 고

1. 반드시 기술적으로 완벽한 상태에서 제품을 사용하세요.
   (손상된 제품을 사용하면 부상이나 화상을 입을 수 있습니다.)
2. 장시간 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원 케이블을 빼주세요.
3. 당사가 지급한 도자 커버 및 겉천 이외에 화재가 발생할 수 있는 물건(섬유제품, 이불, 베개 등)이나 기타 물질을 외부 도자나 제품 위에 올려놓지 마세요.
   (과열로 인해 화재, 감전의 원인이 되거나 인명 피해가 발생될 수 있습니다.)
4. 장애인이나 어린이가 사용할 경우 보호자가 동석해 주세요.
   - 제품 설치 장소로부터 어린이를 멀리해 주세요.
   - 어린이가 제품 위에서 뛰지 않도록 해주세요.
5. 다음과 같은 경우 절대로 사용하지 마시고 고객센터로 점검 및 서비스를 의뢰하세요.
   - 제품을 떨어뜨리거나 제품이 파손되었을 경우
   - 제품이 물에 젖었을 경우
   - 외부 케이블이 손상되었을 경우(감전 및 화재의 위험이 있습니다.)
6. 전원 케이블을 난로와 같은 전열 기구로부터 멀리해 주세요.
7. 본 제품은 실내에서만 사용되도록 설계되었습니다. 실외에서는 사용하지 마세요.
8. 공기 중 이물질이 떠 있는 곳이나 산소를 취급하는 곳에서는 제품을 사용하지 마세요.
9. 제품을 설정하기 전과 사용하는 동안에는 스킨케어 제품이나 화장품, 의약품을 피부에 바르지 마세요.
10. 제품 분리 시 리모컨과 본체 전원을 "Off"에 놓고 전원 케이블을 빼주세요.
11. 발열된 표면 사용 시 주의하세요.
    (심각한 화상의 원인이 될 수 있습니다.)
12. 제품의 도자를 민감도가 떨어지는 부위나 혈액순환이 원활하지 못한 신체 부위에 사용하지 마세요.
    (제품에 남은 열은 어린이나 건강이 좋지 않은 분들에게 위험할 수 있습니다.)
13. 제품 위에서 수면을 취하지 마세요.
    (화상을 입거나 척추에 무리가 발생할 수 있습니다.)
14. 임의로 제품을 분해,수리,개조하지 마세요. 수리가 필요할 때는 고객센터로 연락해주세요.
    (감전 및 화재, 부상, 화상 등의 위험이 있습니다.)
15. 본체와 서브 매트 사이에 손을 넣거나 신체 일부가 들어가지 않도록 주의하세요.
    (감전 및 부상의 위험이 있습니다.)

중요안전사항

16. 다음과 같은 경우에는 반드시 전문의와 상의한 후에 제품을 사용하세요.
    - 각종 질환이 있거나 의심되는 경우
      (악성종양환자/고열환자/기력이 극도로 쇠약해진 사람/생명 연장 기구 사용자 등)
    - 알레르기 또는 열에 과민반응을 보이는 경우
    - 임신 초기 임산부를 제외한 임산부 중 제품의 사용으로 인해 부작용이 우려되는 사람
    - 급성염증 증상 및 오한 등에 의해 정상 체온보다 체온이 높은 사람
    - 최근에 수술한 환자
    - 골감소증(osteopenia)이 있는 사람
    - 이석증, 어지럼증 등의 신체 이상을 진단받거나 치료 중인 사람
    - 이식형 심장박동기 등 인체 이식형 전자 의료기기를 사용하고 있는 사람
    - 고통의 감각을 잘 못 느끼는 사람
    - 발열 증세나 암이 있는 사람
    - 급성 디스크탈출증, 척추관협착증으로 병원에서 진료 및 치료 중인 환자이거나
      재발이 염려되는 사람
17. 다음과 같은 환자는 제품을 사용하지 마세요.
    - 혈전과 색전증, 중증 정맥류, 급성 정맥류 등 의사로부터 사용이 부적당하다고
      판정받은 사람
    - 척추 주변 염좌 또는 근육이 갑자기 수축하여 끊어졌던 증상이 있는 사람
    - 과거에 사고나 질병 등으로 인해 등뼈(척추)에 이상이 있는 자 또는
      등뼈가 좌우로 굽어 있는 사람
    - 골수염이 있는 사람
    - 척추 주변 구(拘) 우려가 있는 사람
    - 압박에 의한 출혈이 발생할 수 있는 사람
    - 제품을 사용할 때 직접적으로 닿는 피부에 염증이나 외상이 있는 경우
    - 골다공증(osteoporosis) 및 중증 골다공증(severe osteoporosis)이 있는 사람
    - 임신 초기의 자(1기, 초기 3개월)
    - 심장에 중증 질환이 있는 사람
    - 조현병이나 조절되지 않는 뇌전증 환자
    - 중증 당뇨병 등에 의해 고도의 말초순환장애가 있어 온도감각 상실이 인정된 사람
    - 골절로 진단 후 치료 중인 사람
    - 기타 의사에 판단에 의하여 사용 금지를 권유 받은 사람
    - 사용 부위에 최근 피부 관련(피부이식) 수술을 받은 사람

현재로서는 본 제품이 의학 물질에 개입하거나 영향을 미친다는 것을 제한하는 증거가 없습니다. 그러므로 약을 복용하는 사람은 제품을 사용하기 전에 의사와 상담을 해야 합니다.

중요안전사항

⚠ 주 의

1. 사용설명서에 따라 사용하시고 사용 시간 및 방법을 준수하세요.
   (1일 1~2회 사용하여 주시고 제조자가 공급한 부품 외에는 사용하지 마시기 바랍니다.)
2. 내부 도자 작동 시 신체를 비틀지 마시고 곧은 자세로 사용하세요.
3. 잘못된 사용법에 의한 화상의 위험이 있으니 사용 시 다음과 같은 사항을 준수하여 주십시오.
   - 고온 설정 시 화상이 우려되오니 도자의 온도를 적정온도로 사용하세요.
   - 체질 및 피부 등의 상태에 따라 적절한 온도로 사용하시고, 피부가 예민한 분은 온도를 낮게 설정하세요.
   - 어린이, 자신이 온도 설정을 할 수 없는 분, 피부감각이 약한 분 등이 장시간 사용하실 때에는 낮은 온도 설정에도 불구하고 저온 화상의 위험이 있으니 주의하세요.
     (반드시 옷을 입고 사용하시기 바랍니다.)
   - 45℃ 초과 설정 시 신체의 한 부위에 2~3분을 초과하여 사용하지 마세요.
     (2~3분 사용 후에는 도자를 다른 부위로 이동시켜야 합니다.)
   - 제품의 표면이 뜨거우니 열에 민감한 사람은 제품 사용 시 주의하세요.
   - 본 제품은 가열 표면을 가지고 있습니다. 열에 둔감한 사람들은 제품을 사용할 시 주의하세요.
4. 전원코드와 외부 배선을 무리하게 구부리지 마세요. (감전 및 화재의 위험이 있습니다.)
5. 제품 위에 촛불, 담배, 술 등의 인화물질 또는 물이 담긴 그릇, 무거운 물건, 날카로운 물건 등을 올려놓지 마세요.(감전 및 화재, 파손의 원인이 됩니다.)
6. 제품에 오르거나 내리실 때 떨어질 위험이 있으니 주의하세요.
7. 제품에 충격을 가하지 마세요.
8. 제품 사용 중 서브 매트를 닫지 마세요. (진행 중인 모드가 자동으로 종료됩니다.)
9. 본체와 서브 매트 사이 공간으로 이물질을 넣거나 들어가지 않도록 주의하세요.
   (감전, 화재, 부상 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
10. 리모컨을 던지거나 연결선을 잡고 휘두르거나 돌리지 마세요.
    (부상 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
11. 서브 매트 개폐 시 신체 혹은 의류 끼임에 주의하세요.
    (감전 ,화재, 부상 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.)
12. 하지 정맥류 등으로 인해 수술 직후에 있으신 분은 사용하지 마세요.
13. 식사 직후 사용은 신체 상태에 따라 울렁거림(오심)과 구토가 유발될 가능성이 있으니 주의하세요.
14. 특정 부위만 집중해서 장시간, 연속적으로 사용하는 등 신체에 무리가 될 수 있는 방법으로 사용 시, 신체 상태에 따라 어지럼증이 유발될 가능성이 있으니 주의하세요.

중요안전사항

15. 기타 사용으로 인해 통증, 어지러움증이 심해지거나 오래 지속되는 경우에는 사용을 중지하세요. (제품을 사용하다 보면 사용자의 신체 상태에 따라 경미한 통증이나 어지럼증이 발생할 수 있습니다.)
16. 사용하려는 부위에 출혈이 있거나, 원인 불명의 통증, 염증을 경험하고 계신다면 사용하지 마세요.
17. 에어셀 마사지기 부품을 심하게 잡아당기거나 던지지 마세요.
18. 에어셀 마사지기의 에어 호스가 꼬이지 않도록 주의해 주세요.
19. 에어셀 마사지기 사용 시 압력이 강하다고 느껴지면 즉시 사용을 중지하세요.
20. 에어셀 마사지기 부품을 날카로운 것으로 찌르면 고장의 원인이 되오니 주의하세요.
21. 에어셀 마사지기 작동 시 일정한 소음이 발생할 수 있습니다.
22. 에어셀 마사지기 사용 시 압력이 평상시와 현저히 다르게 느껴진다면 고객센터에 문의하세요.
23. 에어셀 마사지기 / 에어 마사지 모듈을 물에 담그거나 세탁하지 마세요.
24. 에어셀 마사지기 / 에어 마사지 모듈은 물기 있는 천이나 수건으로 부드럽게 닦아 주세요.
25. 에어셀 마사지기 사용 시 맨살에 사용하지 마세요.
    (제품과 피부 마찰로 인한 부상이 발생할 수 있습니다.)
26. 제품에 앉아있거나 누워있을 때 하중을 자동으로 인식하여 내부 도자가 움직일 수 있으니 주의하세요.
27. 제품 사용 중 USB 메모리의 데이터가 손상될 수 있으니, 중요한 데이터는 별도의 장치에 저장하신 후 사용하세요.
    (손상된 데이터에 대해서는 당사에서 책임지지 않습니다.)
28. 리모컨 케이블 부품 특성상 꼬임이 발생할 수 있으니, 사용 후 상태를 확인하세요.
    (케이블이 꼬여있을 경우 수납이 어려울 수 있습니다.)
29. 서브 매트 사용 전 반드시 완전히 개폐한 상태에서 사용하세요.
    (완전히 개폐하지 않은 상태에서 하중을 가할 시 파손 및 고장의 원인이 됩니다.)
30 .한 개의 콘센트에 여러 개의 전기제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
31 .복부에 사용할 경우 갈비뼈 부위는 사용하지 마십시오.
32. 본 제품은 생활주변방사선안전관리법에 따른 가공 제품이 아닙니다.
33. 소비자의 부주의로 인한 손상 및 취급 표시대로 세탁하지 않는 경우 보상이 되지 않으니 주의해 주세요.
34. 제품 색상은 생산 시기별 차이가 발생할 수 있습니다.
35. 제품 사용 중 몸에 이상이 생기면 반드시 의사와 상의한 후에 사용하세요.

차 례

ⓘ 중요 안전사항 ---------- 01
- 위험
- 경고
- 주의

Ⅰ. 제품 소개편 ---------- 07
1. 제품 특징
2. 각 부위 명칭
3. 모드 설명

Ⅱ. 사용 전 준비편 ---------- 11
1. 제품 구성품 확인
2. 제품 설치 전 유의사항
3. 제품 설치
4. 제품 설치 후 확인


Ⅲ. 제품 사용편 ---------- 17
1. 제품 사용 전 확인
2. 리모컨 구성
3. 리모컨 사용방법
4. 제품 이동 방법

Ⅳ. 관리 및 주의 사항편 ---------- 41
1. 자가 점검
2. 관리 요령 및 보관방법
3. A/S 신청 전 확인
4. 진단 코드 메시지
5. 제품 사양
6. 제품 보증서

Ⅰ. 제품 소개편


1. 제품 특징
2. 각 부위 명칭
3. 모드 설명

1. 제품 특징

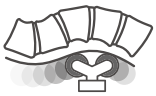

특화된 3D 모션 내부발열도자 New 특허

경추 지압력 강화 및 척추라인을 따라 최적화된 3D 모션 밀착 마사지 제공

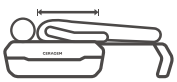


사용자 체형맞춤 기능 특허

척추 길이 및 굴곡도를 세밀하게 측정하여 사용자별 체형에 맞는 맞춤 마사지 제공



에어셀 마사지기 New

혈액순환을 돕는 저소음 에어셀 마사지기(사지압박순환장치)

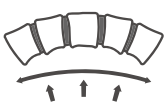

인체 견인 기능 New 특허

추간판탈출증, 퇴행성협착증 등의 치료를 위한 인체 견인 기능(전동식정형용견인장치)



22가지 마사지 모드 Upgrade

17가지 자동모드와 반자동, 수동, 마스터 모드를 통해 컨디션에 맞는 마사지 선택



3단계 속도조절 New 특허

천천히 또는 빠르게 작동하는 마사지 속도 조절 기능을 통해 보다 향상된 마사지감



오토 스타트 New 특허

무게 감지 센서로 전원이 켜진 상태에서 누우면 자동으로 마사지 시작




이지 슬라이딩 New 특허

액츄에이터 기술이 접목된 보조바퀴 장착으로 편리한 슬라이딩 기능

2. 각 부위 명칭

* 디자인(컬러) 및 커버 패턴은 제품에 따라 다를 수 있습니다.

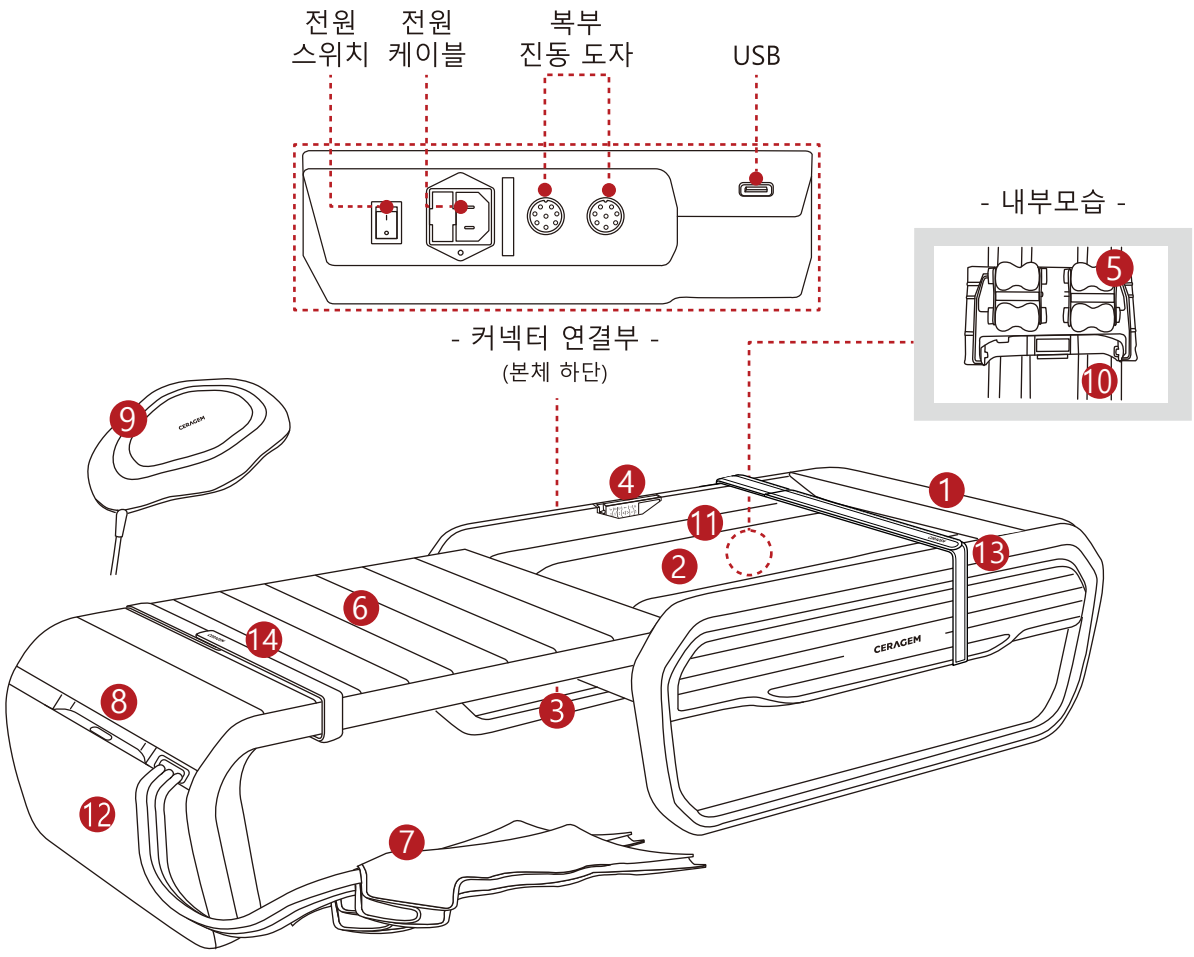

1	헤드쿠션	8	슬라이딩 손잡이
2	겉천	9	복부 진동 도자(발열부, 장착부)
3	전원 스위치, 커넥터(본체 측면 하단)	10	내부발열체(발열부)
4	리모컨(유선케이블)	11	메인 매트
5	내부 도자(발열부)	12	악세사리 보관함
6	서브 매트(발열부, 장착부)	13	흉추 고정 밴드
7	에어셀 마사지기(장착부)	14	발목 고정 밴드

3. 모드 설명

* 내부 도자 속도에 따라 모드 시간은 달라질 수 있습니다.

자동 모드	모드A (기본)	약 36분 30초	척추 라인을 따라 목, 등, 허리, 골반에 집중 온열과 마사지를 제공하여 근육통 완화에 도움이 되는 코스
	모드1 (스페셜)	약 75분	척추라인 전체에 기본 모드보다 강화된 집중 온열과 마사지를 제공하며 근육통 완화에 도움이 되는 코스
	모드2 (릴렉스)	약 18분	짧은 시간 동안 등, 허리, 골반을 부드럽고 가볍게 마사지하는 코스
	모드3 (안정)	약 36분 30초	등 부위 집중 온열 및 마사지와 함께 허리, 골반, 목을 가볍게 마사지하는 코스
	모드4 (순환)	약 36분 30초	등 부위 집중 온열 및 마사지와 함께 허리 및 골반을 가볍게 마사지하는 코스
	모드5 (기초건강)	약 36분 30초	등 부위에 집중 온열과 마사지를 제공하고 골반, 목 부위를 마사지해 근육통 완화에 도움을 주는 코스
	모드6 (에너지)	약 36분 30초	장시간 업무 및 운전으로 지친 등, 허리, 골반에 집중 온열과 마사지를 제공하는 코스
	모드7 (스터디)	약 36분 30초	오래 앉아있을 때 통증이 발생하기 쉬운 목을 중심으로 등, 골반에 집중 온열과 마사지를 제공하는 코스
	모드8 (취침)	약 36분 30초	목, 등 부위 집중 온열과 마사지를 통해 하루 동안 긴장된 근육을 이완 시켜주는 코스
	모드9 (바디라인)	약 36분 30초	등, 허리, 골반에 집중 온열과 마사지를 제공해 근육통 완화에 도움을 주는 코스
	모드10 (스트레칭)	약 36분 30초	쉽게 경직될 수 있는 목, 등, 허리에 집중 온열과 마사지를 제공하고 골반을 마사지하는 코스
	모드11 (견인)	약 36분 30초	견인 효과를 위해 마사지 강도가 자동으로 변경되어 추간판(디스크) 탈출증과 퇴행성 협착증 치료에 도움을 주는 코스
	모드12 (골프)	약 36분 30초	운동 후 피로가 집중되는 목, 등, 허리 부위 집중 온열 마사지를 통해 근육통 완화 효과를 볼 수 있는 코스
	모드13 (명상-골프)	약 36분 30초	명상 사운드와 함께 운동 후 피로가 집중되는 등을 중점적으로 집중 온열 마사지하는 코스
	모드14 (명상-릴렉스)	약 18분	명상 사운드와 함께 짧은 시간 동안 등, 허리, 골반을 부드럽고 가볍게 마사지하는 코스
	모드15 (명상-안정)	약 36분 30초	명상 사운드와 함께 등, 허리 부위에 집중 온열 마사지를 제공하는 코스
	모드16 (명상-호흡)	약 36분 30초	명상 사운드와 함께 허리, 골반을 마사지하는 코스
선택 모드	집중	약 90분	척추라인 전체를 마사지하고, 집중적으로 관리하고 싶은 부위(척추 위치)를 선택하면, 해당 부위와 그 주변에 온열과 마사지를 제공하는 코스
	수동	약 60분	집중적으로 관리하고 싶은 부위(척추 위치)를 선택하면, 해당 부위에 집중 온열을 제공하는 코스
	수동 (마스터)	약 60분	집중적으로 관리하고 싶은 부위(척추 번호)를 선택하면, 해당 부위에 집중 온열을 제공하는 코스
	반자동	약 60분	집중적으로 관리하고 싶은 부위(척추 위치)를 선택하면, 해당 부위에 집중 온열과 마사지를 제공하는 코스
	반자동 (마스터)	약 60분	집중적으로 관리하고 싶은 부위(척추 번호)를 선택하면, 해당 부위에 집중 온열과 마사지를 제공하는 코스

Ⅱ. 사용 전 준비편

1. 제품 구성품 확인
2. 제품 설치 전 유의사항
3. 제품 설치
4. 제품 설치 후 확인

1. 제품 구성품 확인

1	**본체** 근육통 완화에 도움을 주는 기기로 누워서 사용합니다.
2	**복부 진동 도자** 본체에 연결하여 복부에 사용 가능합니다.
3	**복부 진동 도자 커버** 복부 진동 도자에 씌워서 사용합니다.
4	**리모컨** 제품의 기능을 설정하며 작동 상태 확인을 위해 사용합니다.
5	**전원 케이블** 본체와 연결한 뒤 콘센트에 꽂아 사용합니다.
6	**사용설명서** 제품 사용에 관한 내용이 기입되어 있습니다.
7	**겉천** 제품 오염 및 화상으로부터 보호해 주며, 탈착식으로 손세탁 가능합니다.
8	**헤드쿠션** 제품 본체 상단에 부착하여 사용합니다.
9	**에어셀 마사지기** 혈액순환이 잘되게 도움을 주며 다리에 착용하여 사용합니다.
10	**고정 밴드(흉추/발목)** 신체를 안정감 있게 고정해 주며, 탈부착하여 사용합니다.

2. 제품 설치 전 유의사항

1 바닥이 평평한 곳에 설치해 주세요.
(제품이 파손될 우려가 있습니다.)

2 습기나 먼지가 많은 곳에서는 가급적 설치를 피해주세요.
(감전 및 화재의 위험이 있습니다.)

3 지정된 순서에 맞게 설치해 주세요.

4 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마세요.
(오작동의 위험이 있습니다.)

5 제품을 설치할 때 정격전압(AC220V)을 확인해 주세요.
(회로 파손 및 화재의 원인이 될 수도 있습니다.)

6 낡은 콘센트 및 손상된 전원 케이블이나 플러그를 사용하지 마세요.
(감전의 위험이 있습니다.)

7 제품 구입 후 전문 설치기사가 제품을 설치하여 드리오니, 사용자 임의대로 조립, 분해하지 마세요.

3. 제품 설치

*** 제품 구입 후 기본 조립은 설치기사가 진행해 드립니다.**

1 포장박스에서 제품 및 부속품을 꺼내세요.


2 복부 진동 도자를 확인하시고 알맞게 연결하세요.
(커넥터를 올바르게 꽂은 뒤, 고정 장치를 돌려 올바르게 고정시켜 주세요.)

3 리모컨 액정과 키 패드에 붙어있는 비닐을 제거해 주세요.

4 본체에 전원코드를 연결한 뒤 콘센트에 끼우세요

4. 제품 설치 후 확인

1 본체 하단에 위치한 전원을 켜주세요.

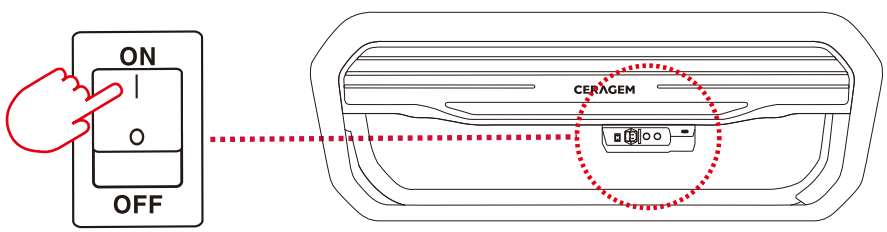

2 리모컨의 전원 버튼을 눌러 화면이 켜지는지 확인하세요.




* 본체에 전원 연결 시 리모컨 측면 LED가 켜지며, 리모컨이 켜지면 LED는 꺼집니다.
* 리모컨 화면은 21페이지를 참고하세요.

⚠ 주의	1. 사용자에 따라 적정한 온도로 설정하여 제품을 사용하세요. 2. 서브 매트를 끝까지 여신 후 앉거나 사용하십시오.

4. 제품 설치 후 확인

에어 마사지 사용 시

에어셀 마사지기 조립 시 연결부 화살표 방향이 위쪽을 향하도록 삽입구에 꽂아 사용해 주십시오.

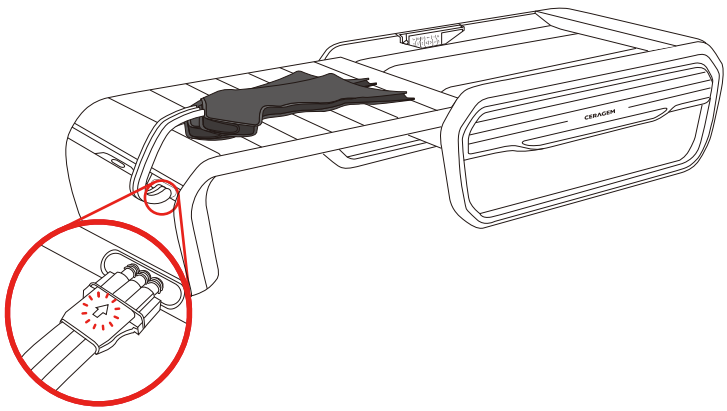


주 의

- 에어 마사지 사용 시 서브 매트에 앉거나 몸을 기대지 마세요.
- 에어 호스가 꺾이지 않도록 주의하세요. (제품고장의 원인이 될 수 있습니다.)

견인 모드 사용 시

다리를 모은 바른 자세로 누워주신 후, 아래 이미지와 같이 밴드를 이용하여 흉추와 발목 부를 고정하신 후 자동모드 11번(견인 모드)을 사용해 주세요.

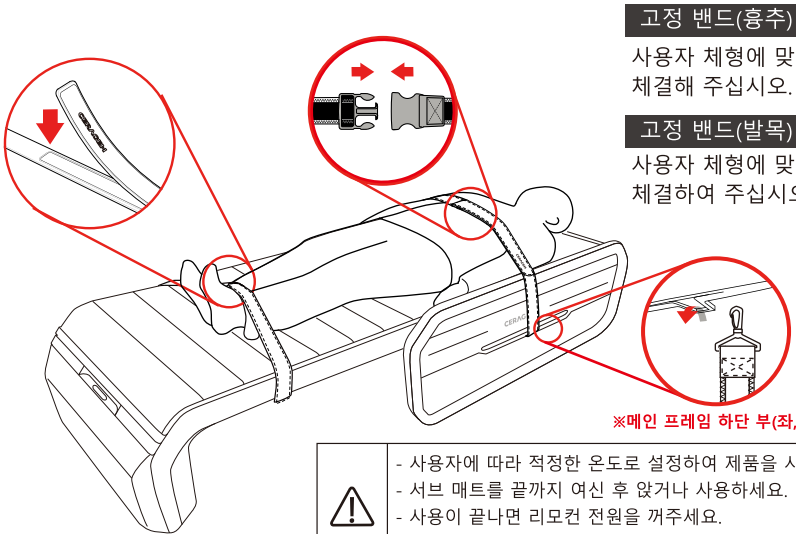

고정 밴드(흉추)

사용자 체형에 맞는 흉추 부위에 고정 밴드를 체결해 주십시오.

고정 밴드(발목)

사용자 체형에 맞는 발목 부위에 고정 밴드를 체결하여 주십시오.

※메인 프레임 하단 부(좌,우)

주 의


- 사용자에 따라 적정한 온도로 설정하여 제품을 사용하세요.
- 서브 매트를 끝까지 여신 후 앉거나 사용하세요.
- 사용이 끝나면 리모컨 전원을 꺼주세요.
- 고정 밴드를 흉추와 발목 부 이외 다른 부위에 사용하거나 너무 꽉 조이지 마세요.
- 사용 후 제자리에 보관하여 주세요.

Ⅲ. 제품 사용 편


1. 제품 사용 전 확인
2. 리모컨 구성
3. 리모컨 사용방법
4. 제품 이동 방법

1. 제품 사용 전 확인

올바른 제품 사용 방법

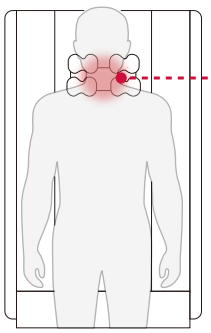


내부 도자가 목 부위에 위치하도록 누워주세요.

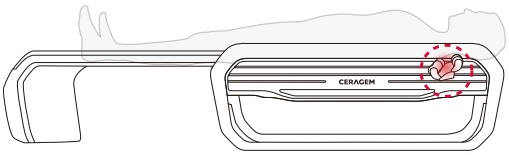


잠깐!
제품에 올바르게 눕지 않을 경우 리모컨 화면에 인체 표시가 나타나지 않을 수 있습니다.
고장이 아니므로 모드 시작 버튼을 눌러 바로 사용해 주십시오.

복부 진동 도자 연결

1 복부 진동 도자를 본체에 연결해 주세요.
(커넥터를 올바르게 꽂은 뒤, 고정 장치를 돌려 고정시켜 주세요.)

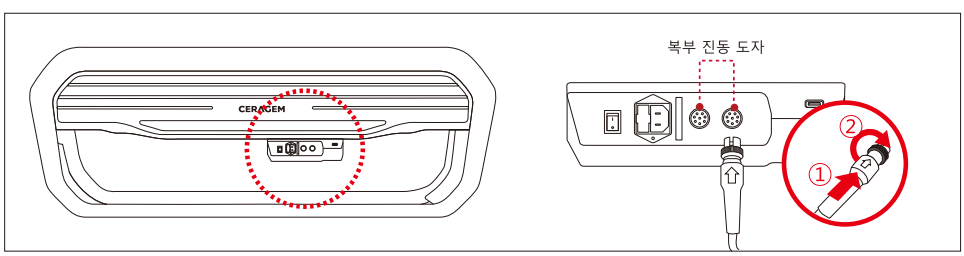


2 본체 전원을 연결한 후, 리모컨 화면에 복부 진동 도자 아이콘이 표시되는지 확인하세요.

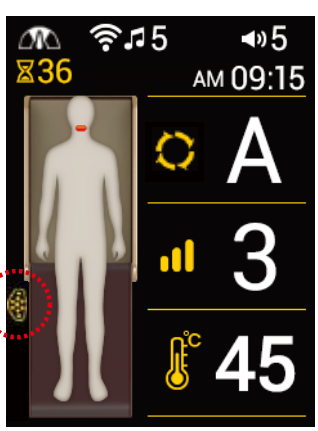

잠깐!
- 제품 사용 전 복부 진동 도자 연결이 바르게 되어있는지 확인해 주세요.
(복부 진동 도자는 연결이 되어있을 시에만 리모컨에 이미지가 표시됩니다.)

2. 리모컨 구성

리모컨 버튼 구성

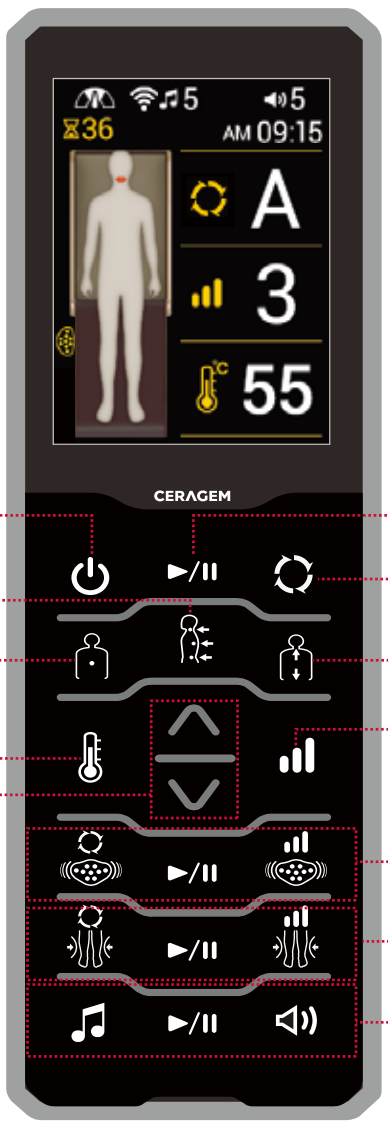

- **전원 On/Off 버튼**
- **집중 모드 선택 버튼**
- **수동 모드 선택 버튼**
- **온도 선택 버튼**
  -내부도자
  -복부 진동 도자
  -메인 매트, 서브매트
- **조절버튼**
  -마사지 속도 조절 :
  길게누름


- **전체 일시정지/시작버튼**
- **자동 모드 선택 버튼**
- **반자동 모드 선택 버튼**
- **강도 선택 버튼**
- **복부 진동 도자 모드/강도** (선택 및 조절)
- **에어 마사지 모드/강도** (선택 및 조절)
- **사운드 선곡/볼륨** (선택 및 조절)

잠깐!

- 복부 진동 도자 연결 시에만 모드,시작/일시정지,강도 조절이 가능 합니다.
- 에어 마사지 연결 시에만 모드,시작/일시정지,강도 조절이 가능합니다.

2. 리모컨 구성

화면 구성

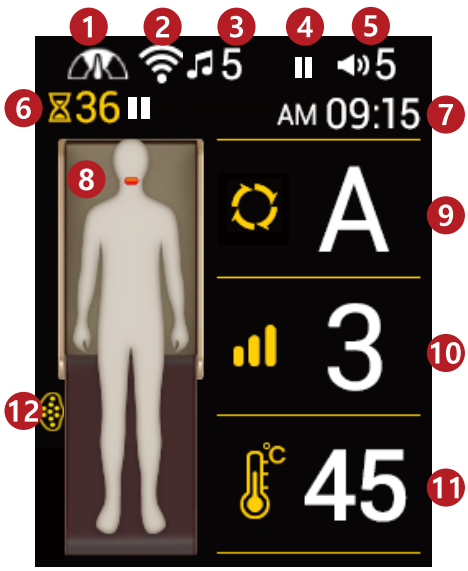


- 메인 화면 -

1	내부 도자 속도 표시(저속/정속/고속)
2	인터넷 연결 표시(미연결시 공유기 아이콘)
3	음원표시(세라젬사운드/블루투스/USB/음성안내)
4	사운드 일시정지
5	볼륨(0~20)
6	남은 시간 및 모드 일시정지 표시(분 단위)
7	현재 시간 표시(인터넷 연결되었을 시 표시)
8	내부 도자 위치
9	모드 표시(자동모드 A,1~16/집중/반자동/수동)
10	내부 도자 강도 표시(1~9단)
11	내부 도자 온도 표시(OFF/30~65℃)
12	복부 진동 도자



- 온도 설정화면 -

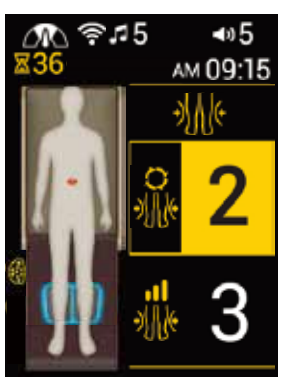

- 에어 마사지 설정화면 -




- 복부 진동 도자 설정화면 -

참깐!

- 서브 매트가 닫혀있을 시 제품이미지는 서브 매트 닫힘 이미지로 표시됩니다.
- 리모컨 조작 후 10초가 지나면 화면이 어두워집니다.(버튼 조작 시 화면이 다시 밝아집니다.)


3. 리모컨 사용방법

제품 켜기

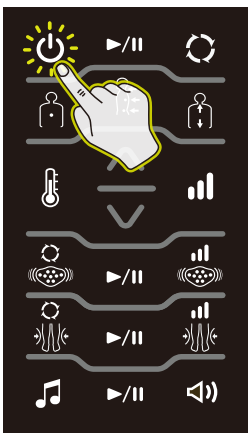

1. 제품 본체 케이블과 전원 스위치를 확인하신 후 리모컨 전원 버튼을 누르세요.
   - 리모컨을 끄실때는 전원버튼을 약 2초간 눌러 주십시오.

잠깐!

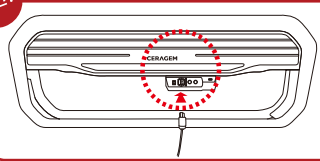

- 사용 전 전원코드가 제품과 콘센트에 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
  (전원이 켜지지 않을 시 42페이지를 참고하세요.)



2. 리모컨 화면에 세라젬 로고가 나타나며 리모컨이 켜집니다.



3. 메인화면이 표시되면 원하시는 버튼을 눌러 사용하세요.
   - 마지막 사용 설정값이 표시됩니다.
     (비정상 종료 시 설정값 저장이 되지 않습니다.)

잠깐!

- 제품이 닫혔을때에는 제품 이미지가 닫힌 상태로 표시됩니다.


3. 리모컨 사용방법

온도 설정하기









1. 현재 온도를 확인하신 후 온도 버튼을 눌러주세요.
   - 메인화면은 내부 도자 현재 온도가 표시됩니다.

잠깐!
- 제품이 닫혔을 때에는 제품 이미지가 닫힌 상태로 표시됩니다.

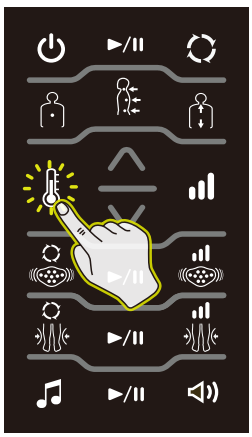

2. 온도 선택 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택하세요.
   - 온도 선택 순서 : 내부 도자→메인 매트→서브 매트→복부진동도자(3구도자 등)
   - 복부 진동 도자와 3구도자는 연결 시 에만 표시됩니다.
   - 온도 선택 시 해당 항목 이미지가 붉게 표시됩니다.
   - 13번 명상모드(골프) 사용시 내부도자 온도는 30~45℃ 범위로 설정 가능합니다.

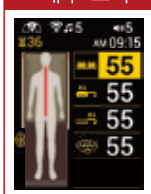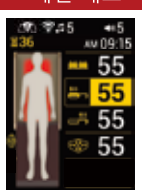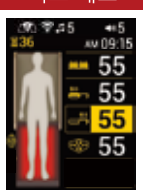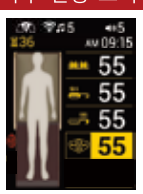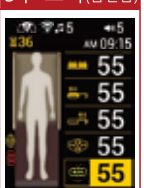내부 도자	메인 매트	서브 매트	복부 진동 도자	3구 도자(옵션품)
				
Off, 30~65℃	Off, 30~60℃			

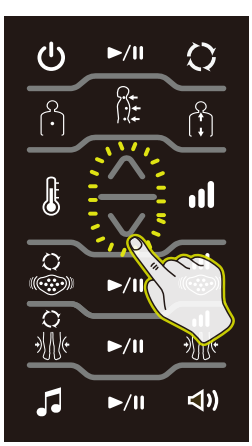


3. 변경하고 싶은 온도를 선택한 후 상하 버튼을 이용하여 원하는 온도로 설정한 후 사용하세요.
   - 설정이 완료되면 잠시 후 메인화면으로 전환됩니다.

주 의	저온 화상이 발생할 수 있으니 복부 진동 도자, 3구도자(옵션품)를 피부에 직접 닿지 않도록 해 주시고, 민감도가 떨어지는 부위나 혈액순환이 원활하지 않은 신체 부위(눈 주위, 목, 겨드랑이, 무릎 뒤쪽 등)에 장시간 사용하지 마세요.


3. 리모컨 사용방법

강도 설정하기

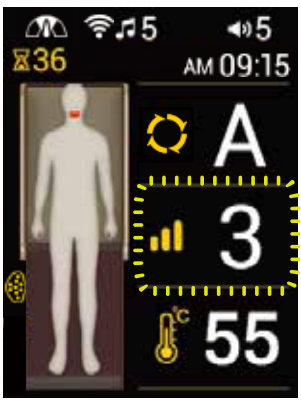


1. 현재 강도를 확인하신 후 강도 버튼을 눌러 주세요.
   - 메인화면은 내부 도자 현재 강도가 표시됩니다.

잠깐!
- 제품이 닫혔을때에는 제품 이미지가 닫힌 상태로 표시됩니다.

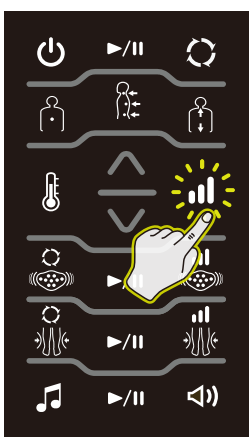

2. 강도 버튼을 반복으로 누르거나 상하 버튼을 눌러 원하는 강도로 설정하세요.
   - 해당 항목이 노란색으로 표시되는 동안 강도 버튼 혹은 상하 버튼을 이용하여 원하는 강도로 설정할 수 있습니다
   - 강도는 1~9단까지 설정 가능합니다.

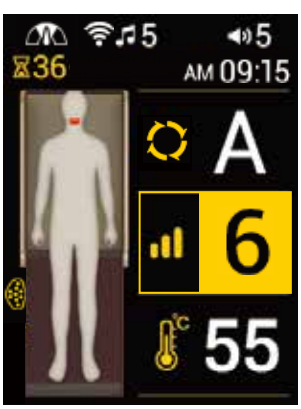


3. 리모컨 화면에서 변경된 강도 설정값을 확인하세요.


3. 리모컨 사용방법

내부 도자 속도 설정하기

* 자동모드 사용 시 내부 도자 속도 표시가 나타나며 내부 도자의 속도를 설정할 수 있습니다.
(일부 모드는 속도 설정이 불가능합니다.)

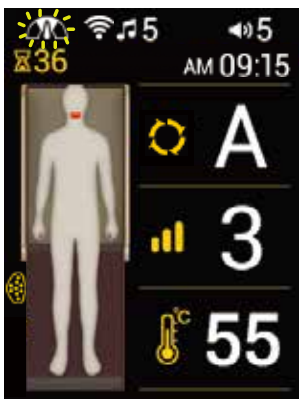


1. 현재 모드의 속도를 확인하세요.

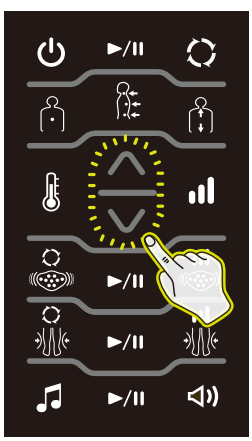


2. 상하 버튼을 길게 눌러 원하는 속도로 설정하세요.

참깐!
- 내부 도자 속도 설정은 리모컨 메인 화면에서만 설정 가능합니다.

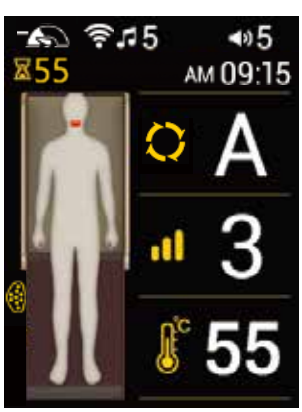

3. 리모컨 화면에서 변경된 모드 속도를 확인하세요.

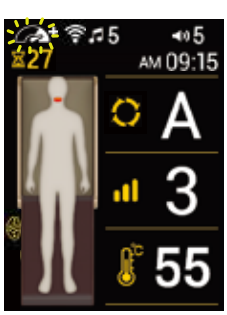


저속	정속	고속
		

3. 리모컨 사용방법

온열 소파 모드(서브 매트 닫힘) 설정하기



1. 리모컨 전원을 켠 뒤 화면을 확인하세요.

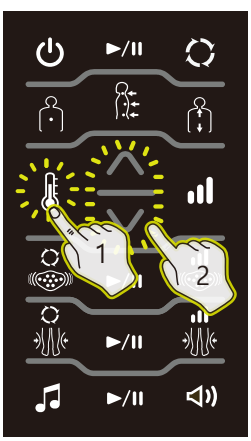

2. 변경하고 싶은 온도 버튼을 누른 후 상하 버튼을 이용하여 원하는 온도로 설정하세요.
   - 온열 소파 모드 시 온도조절(예열)이 가능합니다.
   - 복부 진동 도자와 3구도자는 연결 시 에만 표시됩니다.
   - 온도 선택 시 해당 항목 이미지가 붉게 표시됩니다.

내부 도자	메인 매트	서브 매트	복부 진동 도자	3구 도자(옵션품)
				
Off, 30~65℃	Off, 30~60℃			




3. 설정 완료 후 현재 온도가 표시됩니다.
   - 사용 중 리모컨 조작 시 남은 시간은 초기화됩니다.

⚠ 주 의	저온 화상이 발생할 수 있으니 복부 진동 도자, 3구도자(옵션품)를 피부에 직접 닿지 않도록 해 주시고, 민감도가 떨어지는 부위나 혈액순환이 원활하지 않은 신체 부위(눈 주위, 목, 겨드랑이, 무릎 뒤쪽 등)에 장시간 사용하지 마세요.


3. 리모컨 사용방법

사운드 설정하기

* 제품에 등록된 세라젬 사운드 혹은 외부음원 연결 시 사용자가 원하는 사운드를 청취할 수 있습니다.

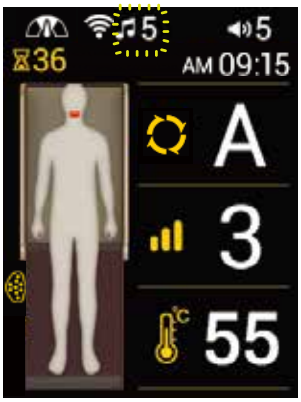


1. 현재 사운드 상태를 확인하세요.
   - 명상 모드 사용 중에는 음원이 재생되지 않습니다.

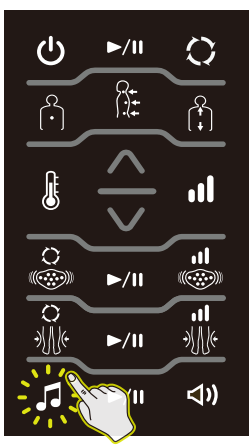

2. 사운드 선곡 버튼을 반복으로 눌러 원하는 음원으로 선택한후 재생 혹은 상하 버튼을 이용하여 원하는 사운드로 설정하세요.
   - USB 연결 시 음원이 없는 경우 아이콘이 표시되지 않습니다.
   - 외부 음원은 연결 시 해당 아이콘이 자동으로 표시됩니다.
   - 음성안내 설정 상태에서 사운드 일시정지 혹은 볼륨을 0으로 설정하면 음성안내가 비활성 됩니다.



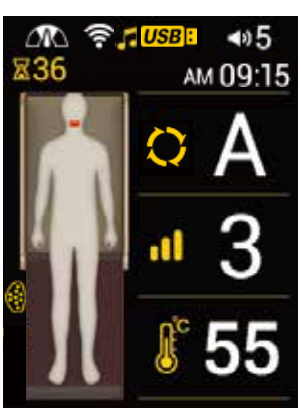


3. 리모컨 화면에서 변경된 사운드 상태를 확인하세요.
   - USB 사양이나 저장 용량에 따라 파일 인식 시간이 지연될 수 있습니다.


참깐!
- 메인 모드 일시정지 시 사운드도 함께 일시정지되며, 사운드 재생 버튼을 다시 누르면 사운드가 다시 재생됩니다.
- 사용 중 사운드 일시정지 시 일시정지 이미지가 표시됩니다.
- 주변 전자파로 인한 잡음이 발생할 수 있습니다.

3. 리모컨 사용방법


볼륨 설정하기

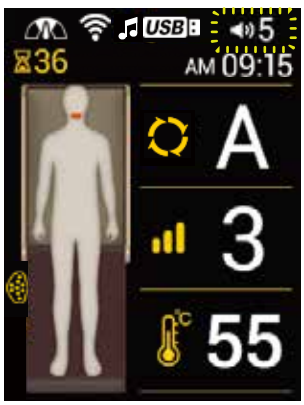

1. 현재 볼륨 상태를 확인하세요.

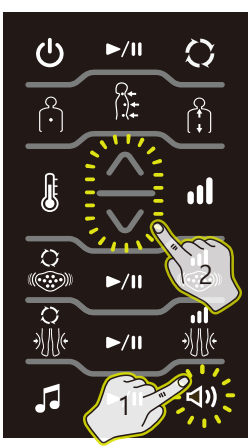

2. 볼륨 버튼을 반복으로 누르거나 상하 버튼을 눌러 원하는 볼륨으로 설정하세요.
   - 사운드 상태 설정 중에는 해당 항목 숫자가 노란색으로 표시되며, 이때 원하는 사운드 및 볼륨으로 설정할 수 있습니다.
   - 볼륨은 0~20 까지 설정 가능합니다.
   - 음성 안내 볼륨은 설정 선택 시에만 볼륨 버튼으로 조절할 수 있습니다.

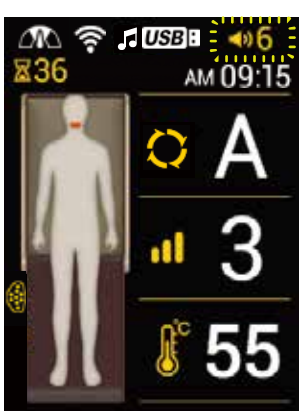


3. 리모컨 화면에서 변경된 볼륨 상태를 확인하세요.

잠깐!
- 주변 전자파로 인한 잡음이 발생할 수 있습니다.


3. 리모컨 사용방법

복부 진동 도자 모드 설정하기

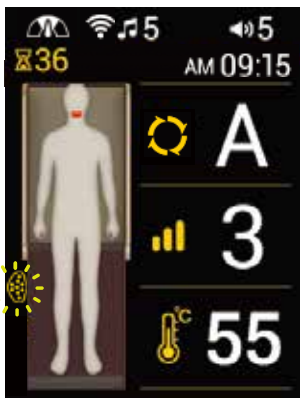

1. 복부 진동 도자가 바르게 연결 되었는지 확인하세요.
   - 현재 상태가 표시됩니다.

잠깐!
- 제품이 닫혔을 때에는 제품 이미지가 닫힌 상태로 표시됩니다.

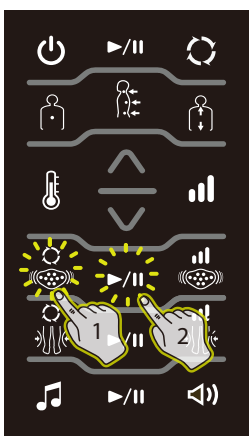

2. 복부 진동 도자 모드 버튼을 눌러 모드를 설정한 후 시작/일시정지 버튼을 누르세요.
   - 해당 항목이 노란색으로 표시되는 동안 진동 도자 모드 버튼 혹은 상하 버튼을 이용하여 원하는 모드로 설정할 수 있습니다.
   - 모드는 1~3모드 사용 가능합니다.

	연속 누름(1~3 순차적 선택)
모드 1~3	약 18분

주 의	복부 진동 도자를 바닥에 놓고 작동 시키지 마세요. (제품 표면이 손상될 수 있습니다.)




3. 설정 종료 후 선택된 모드로 시작됩니다.
   - 설정이 완료되면 잠시 후 메인화면으로 전환됩니다.


잠깐!
- 메인 모드 일시정지 시 복부 진동 모드도 일시정지되며, 복부 진동 도자 시작 버튼을 다시 누르면 복부 진동 모드가 다시 시작됩니다.
- 사용 중 복부 진동 도자 모드 일시정지 시 일시정지 이미지가 표시됩니다.

3. 리모컨 사용방법

복부 진동 도자 강도 설정하기

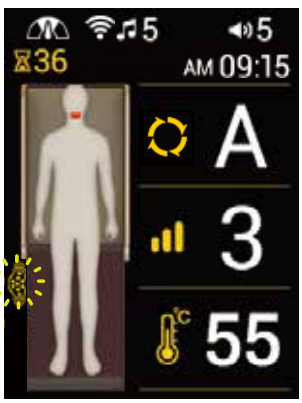

1. 리모컨 화면을 확인하세요.
   - 현재 상태가 표시됩니다.

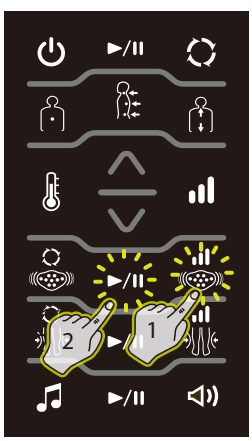

2. 복부 진동 도자 강도 버튼을 눌러 강도를 설정한 후 시작/일시정지 버튼을 누르세요.
   - 해당 항목이 노란색으로 표시되는 동안 진동 도자 강도 버튼 혹은 상하 버튼을 이용하여 원하는 강도로 설정할 수 있습니다
   - 강도는 1~3단계 설정 가능합니다.

	연속 누름(강도1~3 순차적 선택)




3. 설정 종료 후 선택된 강도로 시작됩니다.
   - 설정이 완료되면 잠시 후 메인화면으로 전환됩니다.

⚠ 주 의	저온 화상이 발생할 수 있으니 복부 진동 도자, 3구도자(옵션품)를 피부에 직접 닿지 않도록 해 주시고, 민감도가 떨어지는 부위나 혈액순환이 원활하지 않은 신체 부위(눈 주위, 목, 겨드랑이, 무릎 뒤쪽 등)에 장시간 사용하지 마세요.

3. 리모컨 사용방법

에어 마사지 모드 설정하기

*반드시 에어셀 마사지기를 본체에 연결하신 후 사용해 주세요.

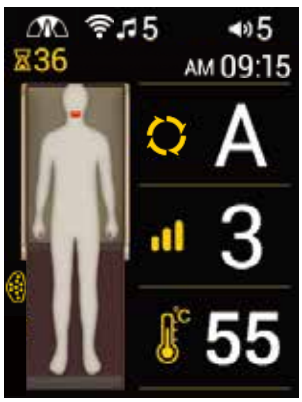

1. 에어셀 마사지기가 바르게 연결 되었는지 확인하세요.


- 현재 상태가 표시됩니다.



잠깐!

- 에어 마사지 사용 시 에어 펌프와 솔레노이드의 동작음('우~웅, 탁탁') 이 발생하더라도 고장이 아니므로 안심하고 사용하셔도 됩니다.
- 제품이 닫혔을 때에는 제품 이미지가 닫힌 상태로 표시됩니다.


주 의	- 에어셀 마사지기의 지퍼를 끝까지 올리신 후 사용해 주세요. - 다리부 이외 다른 부위에 사용하지 마세요.

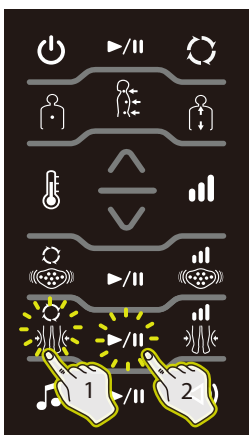

2. 에어 마사지 버튼을 눌러 모드를 설정한 후 시작/일시정지 버튼을 누르세요.

- 해당 항목이 노란색으로 표시되는 동안 에어셀 마사지 버튼 혹은 상하 버튼을 이용하여 원하는 모드로 설정할 수 있습니다.
- 모드는 1~3모드 사용 가능합니다.

	연속 누름(모드 1~3 순차적 선택)
모드 1~3	약 18분

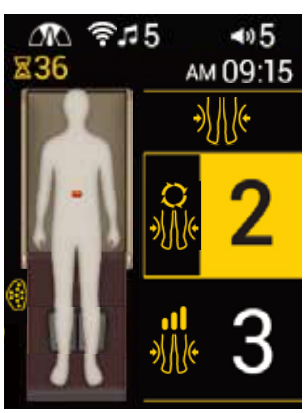

3. 설정 종료 후 선택된 모드로 시작됩니다.


- 설정이 완료되면 잠시 후 메인화면으로 전환됩니다.

잠깐!


- 메인 모드 일시정지 시 에어 마사지도 일시정지되며, 메인 마사지를 시작해도 에어 마사지는 다시 시작되지 않습니다.(에어 마사지 별도로 시작 필요)
- 사용 중 에어 마시지 일시정지 시, 일시정지 이미지가 표시됩니다.

3. 리모컨 사용방법

에어 마사지 강도 설정하기

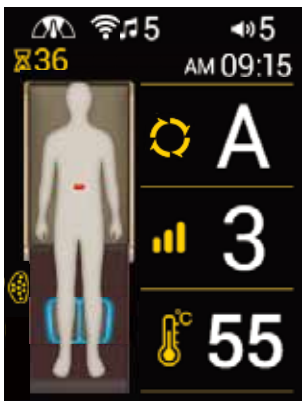


1. 리모컨 화면을 확인하세요.
   - 현재 상태가 표시됩니다.

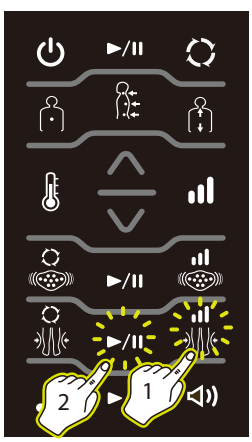

2. 에어 마사지 강도 버튼을 눌러 강도를 설정한 후 시작/일시정지 버튼을 누르세요.
   - 해당 항목이 노란색으로 표시되는 동안 에어 마사지 강도 버튼 혹은 상하 버튼을 이용하여 원하는 모드로 설정할 수 있습니다.
   - 강도는 1~9단계 설정 가능합니다.

	연속 누름(강도 1~9 순차적 선택)

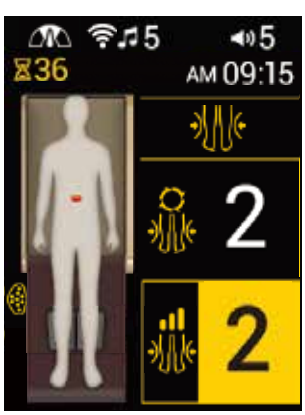


3. 설정 종료 후 선택된 강도로 시작됩니다.
   - 설정이 완료되면 잠시 후 메인화면으로 전환됩니다.

3. 리모컨 사용방법


자동모드 설정하기

* 내부 도자 속도에 따라 모드 시간은 달라질 수 있습니다.

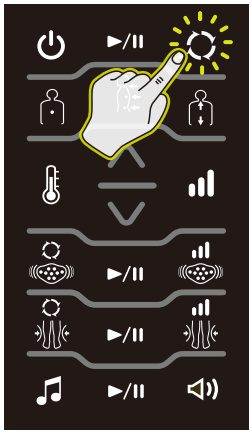

1. 리모컨 전원을 켠 뒤 현재 상태를 확인하신 후 자동 모드 버튼을 눌러주세요. (표준속도 시 모드 시간)


모드A(기본)	약 36분 30초		
모드1(스페셜)	약 75분	모드2(릴렉스)	약 18분
모드3(안정)	약 36분 30초	모드4(순환)	약 36분 30초
모드5(기초건강)	약 36분 30초	모드6(에너지)	약 36분 30초
모드7(스터디)	약 36분 30초	모드8(취침)	약 36분 30초
모드9(바디라인)	약 36분 30초	모드10(스트레칭)	약 36분 30초
모드11(견인)	약 36분 30초	모드12(골프)	약 36분 30초
모드13(명상-골프)	약 36분 30초	모드14(명상-릴렉스)	약 18분
모드15(명상-안정)	약 36분 30초	모드16(명상-호흡)	약 36분 30초

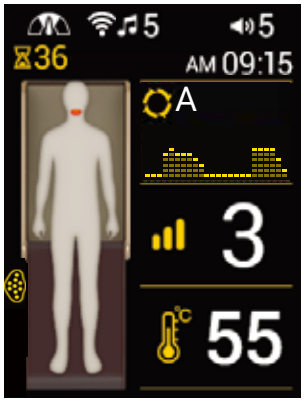

2. 자동 모드 버튼을 눌러 모드를 선택하면 체형인식이 시작되오니 올바른 자세로 누워주세요.

- 해당 항목이 노란색으로 표시되는 동안 자동 모드 버튼 혹은 상하 버튼을 이용하여 원하는 모드로 설정할 수 있습니다.
- 모드가 시작되면 세라젬 사운드가 랜덤 재생됩니다. (명상 모드 사용 중에는 음원이 재생되지 않습니다.)
- 자세가 올바르지 않거나, 하중이 인식되지 않을 시 인체 아이콘이 나타나지 않습니다.
- 체형인식 중에는 모드 일시정지를 사용하실 수 없습니다.
- 체형 그래프는 사용자마다 다르게 표시됩니다.

	연속 누름(모드A, 1~16, 순차적 선택)

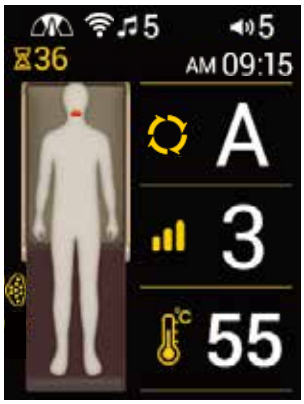

3. 체형인식이 끝나면 자동으로 모드가 실행되오니 올바른 자세를 유지해주세요.

- 인체 아이콘 상단에 남은시간이 표시됩니다.


잠깐!

- 일시정지 후 제품에서 자리를 비울 시 부상 방지를 위해 내부 도자가 수직으로 내려갑니다. (모드 재 실행 시 설정한 강도로 복원합니다.)
- 일시정지 5분 경과 후 제품이 자동으로 꺼집니다.


3. 리모컨 사용방법

집중모드 설정하기


모드시간	약 90분

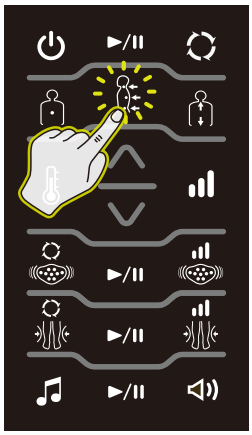

1. 리모컨 전원을 켠 뒤 현재 상태를 확인하신 후 집중 모드 버튼을 눌러주세요.

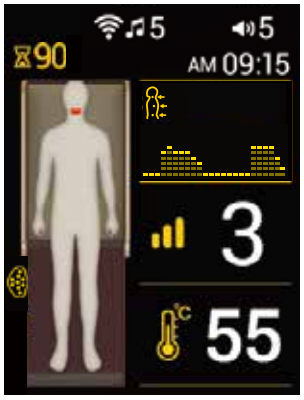

2. 체형인식을 완료한 후 집중모드가 시작되오니 올바른 자세를 유지해 주세요.
   - 인체 아이콘 상단에 남은 시간이 표시됩니다.

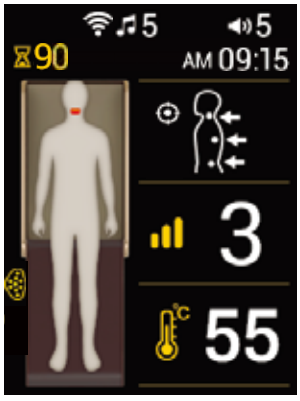


3. 특정 위치를 설정하여 사용하고 싶은 경우, 상하 버튼을 이용하여 원하는 위치로 내부 도자를 이동시켜 사용하세요.
   - 집중모드 버튼을 한번 더 눌러 위치 설정을 해제하면 내부도자가 전체적으로 움직입니다.
   - 리모컨 설정 후 90분이 지나면 자동으로 리모컨이 꺼지며 모드가 종료 됩니다.

잠깐!
- 일시정지 후 제품에서 자리를 비울 시 부상 방지를 위해 내부 도자가 수직으로 내려갑니다. (모드 재 실행 시 설정한 강도로 복원합니다.)
- 일시정지 5분 경과 후 제품이 자동으로 꺼집니다.


3. 리모컨 사용방법

수동모드 설정하기


모드시간	약 60분

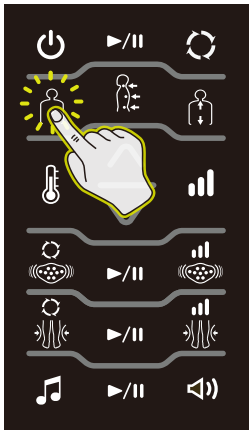

1. 리모컨 전원을 켠 뒤 현재 상태를 확인하신 후 수동 모드 버튼을 눌러주세요.

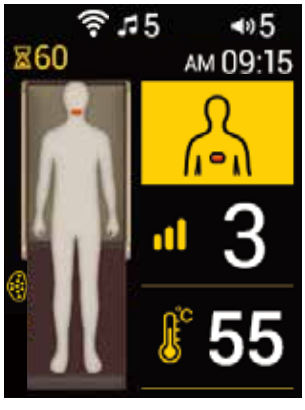

2. 상하 버튼을 이용하여 원하는 지점으로 내부 도자를 이동시키세요.

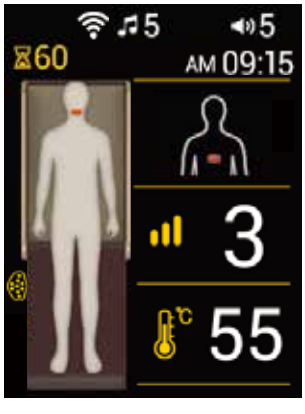

3. 지정하신 위치에서 수동모드가 시작되오니 올바른 자세를 유지해주세요.

- 인체 아이콘 상단에 남은 시간이 표시됩니다.
- 사용 중 리모컨 조작 시 남은 시간은 초기화됩니다.
- 리모컨 설정 후 5분이 경과하면 화상방지를 위해 내부 도자가 자동으로 이동합니다.
- 리모컨 설정 후 60분이 지나면 자동으로 리모컨이 꺼지며 모드가 종료됩니다.


잠깐!

- 일시정지 후 제품에서 자리를 비울 시 부상 방지를 위해 내부 도자가 수직으로 내려갑니다. (모드 재 실행 시 설정한 강도로 복원합니다.)
- 일시정지 5분 경과 후 제품이 자동으로 꺼집니다.


3. 리모컨 사용방법

수동모드(마스터모드) 설정하기

모드시간	약 60분

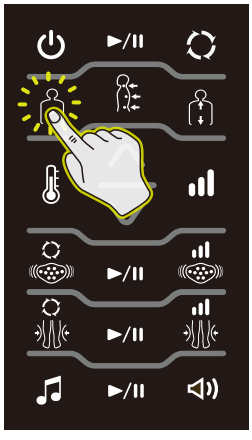


1. 리모컨 전원을 켠 뒤 현재 상태를 확인하신 후 수동 모드 버튼을 두번 눌러주세요.

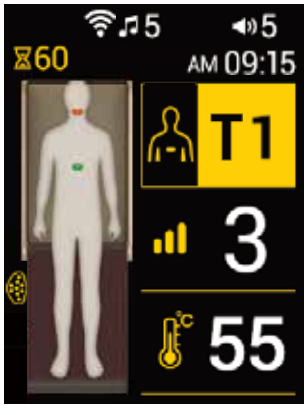

2. 상하 버튼을 이용하여 원하는 지점으로 내부 도자를 이동시키세요.
   - 선택 지점은 녹색으로 표시됩니다.

위치	화면 표시(24구간)
목 부위 (경추)	C1~7
등 부위 (흉추)	T1~12
허리 부위 (요추)	L1~5

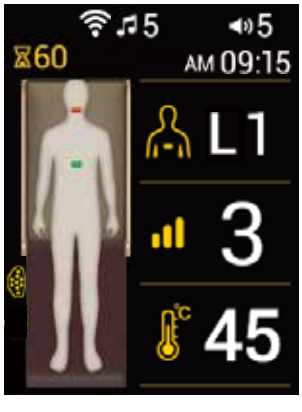

3. 지정하신 위치를 기준으로 체형인식을 시작한 후 수동 마스터모드가 시작됩니다.
   - 인체 아이콘 상단에 남은 시간이 표시됩니다.
   - 사용 중 리모컨 조작 시 남은 시간은 초기화됩니다.
   - 리모컨 설정 후 5분이 경과하면 화상방지를 위해 내부 도자가 자동으로 이동합니다.
   - 리모컨 설정 후 60분이 지나면 자동으로 리모컨이 꺼지며 모드가 종료됩니다.


잠깐!
- 일시정지 후 제품에서 자리를 비울 시 부상 방지를 위해 내부 도자가 수직으로 내려갑니다. (모드 재 실행 시 설정한 강도로 복원합니다.)
- 일시정지 5분 경과 후 제품이 자동으로 꺼집니다.

3. 리모컨 사용방법

반자동모드 설정하기

* 반자동모드는 종료후 내부도자가 경추로 이동하지 않습니다.


모드시간	약 60분

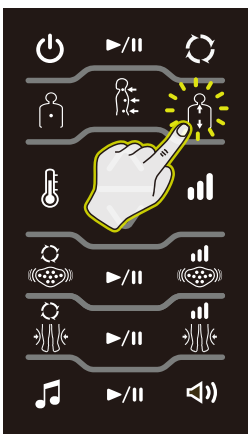

1. 리모컨 전원을 켠 뒤 현재 상태를 확인하신 후 반자동 모드 버튼을 눌러주세요.



2. 상하 버튼을 이용하여 원하는 지점으로 내부 도자를 이동시키세요.

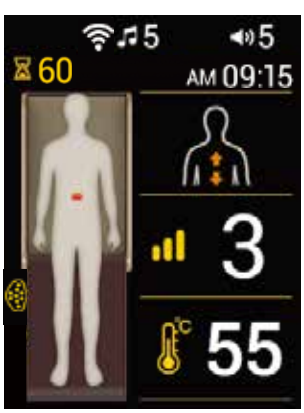

3. 지정하신 위치에서 반자동모드가 시작되오니 올바른 자세를 유지해 주세요.
   - 인체 아이콘 상단에 남은 시간이 표시됩니다.
   - 사용 중 리모컨 조작 시 남은 시간은 초기화됩니다.
   - 리모컨 설정 후 60분이 지나면 자동으로 리모컨이 꺼지며 모드가 종료됩니다.


잠깐!
- 일시정지 후 제품에서 자리를 비울 시 부상 방지를 위해 내부 도자가 수직으로 내려갑니다. (모드 재 실행 시 설정한 강도로 복원합니다.)
- 일시정지 5분 경과 후 제품이 자동으로 꺼집니다.

3. 리모컨 사용방법


반자동모드(마스터모드) 설정하기

* 반자동 마스터모드는 종료후 내부도자가 경추로 이동하지 않습니다.

모드시간	약 60분

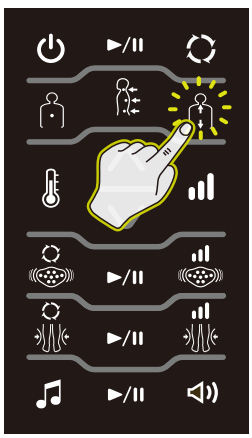


1. 리모컨 전원을 켠 뒤 현재 상태를 확인하신 후 반자동 모드 버튼을 두번 눌러주세요.

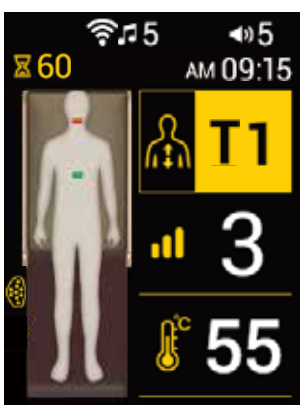

2. 상하 버튼을 이용하여 원하는 지점으로 내부 도자를 이동시키세요.
   - 선택 지점은 녹색으로 표시됩니다.

위치	화면 표시(24구간)
목 부위 (경추)	C1~7
등 부위 (흉추)	T1~12
허리 부위 (요추)	L1~5

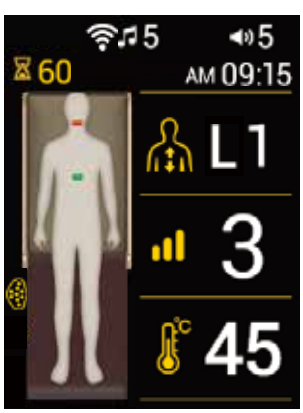


3. 체형인식을 완료한 후 반자동 마스터모드가 시작되오니 올바른 자세를 유지해 주세요.
   - 인체 아이콘 상단에 남은 시간이 표시됩니다.
   - 사용 중 리모컨 조작 시 남은 시간은 초기화됩니다.
   - 리모컨 설정 후 60분이 지나면 자동으로 리모컨이 꺼지며 모드가 종료 됩니다.

잠깐!
- 일시정지 후 제품에서 자리를 비울 시 부상 방지를 위해 내부 도자가 수직으로 내려갑니다. (모드 재 실행 시 설정한 강도로 복원합니다.)
- 일시정지 5분 경과 후 제품이 자동으로 꺼집니다.

3. 리모컨 사용방법

기기번호 설정하기

* 제품이 한 공간에 두 대 이상 있을 시 필요에 따라 기기 번호를 변경하여 사용할 수 있습니다.
* 블루투스, 앱 연결 시 설정한 기기 번호로 검색 가능합니다.

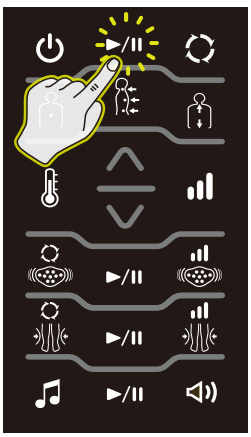

1. 서브 매트를 닫은 후 시작/일시정지 버튼을 약 3초간 길게 눌러주세요.



2. 화면 좌측상단에 현재 제품 번호가 나타납니다.




3. 상하 버튼을 이용하여 원하는 제품 번호로 변경하세요.
   - 기기 번호는 설정시에만 나타납니다.
   - 기기 번호는 01~99번까지 설정 가능합니다.


3. 리모컨 사용방법

인터넷 연결하기


* 앱 마켓에서 세라젬에서 제공하는 앱을 다운로드 하신 후 사용해 주세요.

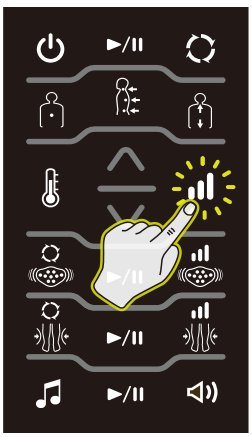

1. 서브 매트를 닫은 후 강도 버튼을 약 3초간 길게 눌러주세요.

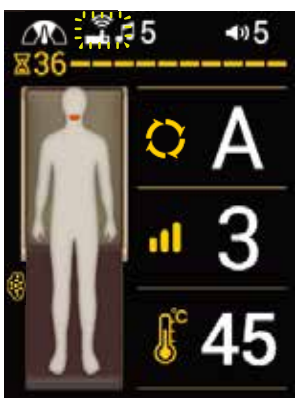


2. 인터넷 연결이 준비되면 아이콘( )이 나타납니다.
   -앱의 설명된 연결 지침을 따라주세요.

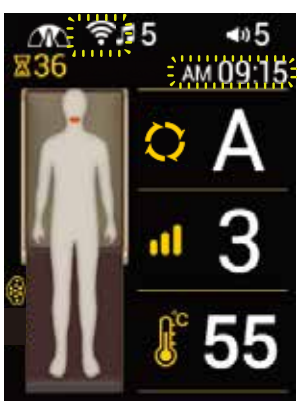

3. 연결이 완료되면 아이콘( )이 신호 세기에 맞게 표시되며, 현재 시간도 함께 표시됩니다.
   - 인터넷 연결이 되어있지 않을 시, 현재 시간은 표시되지 않습니다.


4. 제품 이동 방법

1 서브 매트를 닫은 후 본체에서 복부 진동 도자의 케이블을 분리해 주세요.

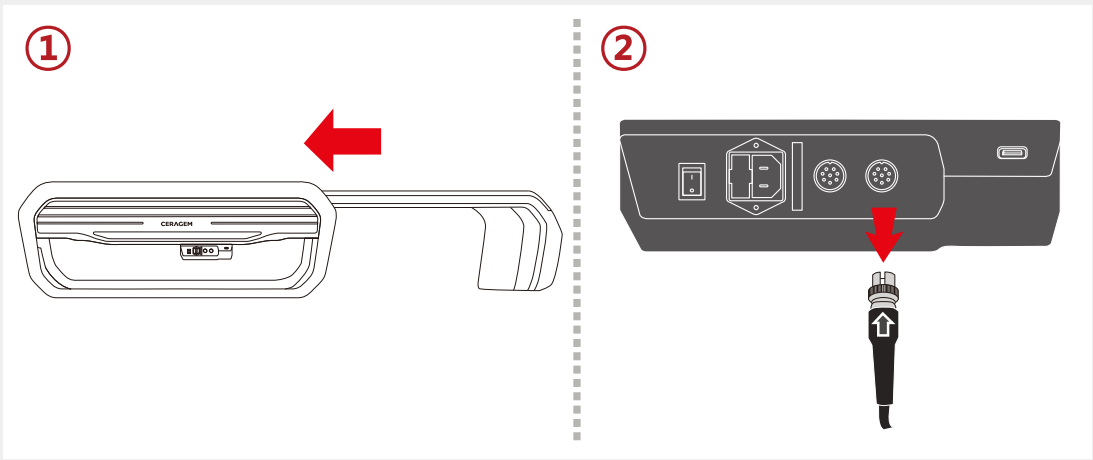

주 의	- 리모컨 전원을 끈 후, 약 10초 뒤 보조 프레임을 닫아주세요. (전원코드를 분리한 후 서브 매트를 닫을 시 서브 매트가 완전히 닫히지 않습니다.)

2 두 사람이 함께 양쪽 본체 하단 프레임을 잡고 수평으로 들어 이동하세요.

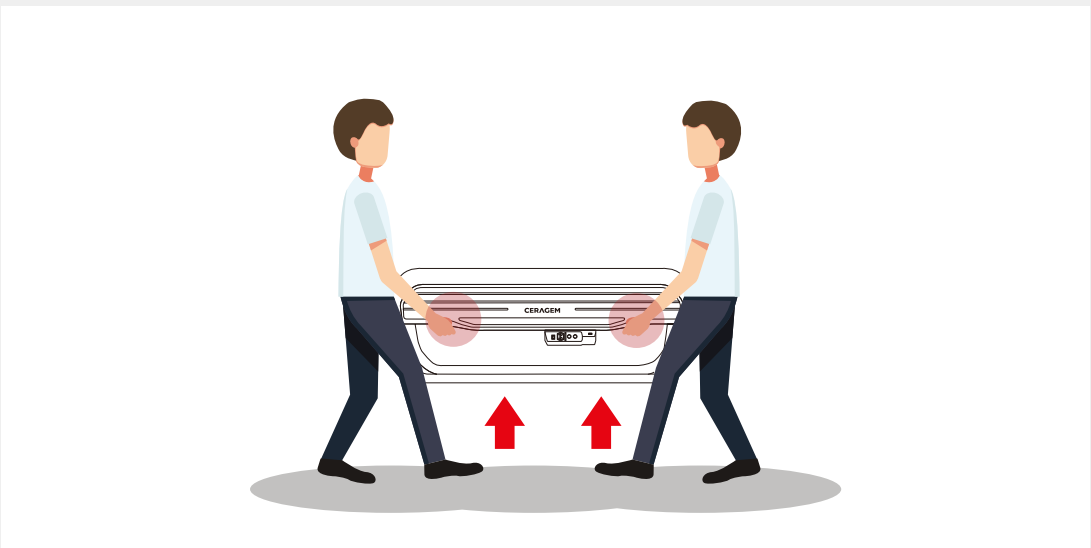

주 의	- 제품을 들어 올릴 때 허리를 펴고 무릎을 구부린 상태에서 천천히 들어 올리세요. - 이동 중 서브 매트부가 열리지 않게 주의하세요.

Ⅳ. 관리 및 주의사항 편

1. 자가 점검
2. 관리 요령 및 보관방법
3. A/S 신청 전 확인
4. 진단 코드 메시지
5. 제품 사양
6. 제품 보증서

1. 자가 점검

사용 전 점검사항

1. 전원 플러그가 콘센트와 연결되어 있나요?
2. 본체의 전원 스위치가 'ON' 상태인지 확인하셨나요?
3. 리모컨 전원 'ON'시 화면이 켜지나요?
4. 도자의 온도가 적정 사용온도인지 확인하셨나요?
5. 복부 진동 도자가 외관 상 이상한 점이 있나요?
6. 도자 커버에 손상이 없는지 확인하셨나요?

사용 후 점검사항

1. 리모컨 전원 'OFF'시 화면이 꺼지나요?
2. 본체의 전원 스위치가 'OFF' 상태인지 확인하셨나요?
3. 전원 플러그와 콘센트 연결이 해제되어 있나요?

1. 자가 점검

자가진단 가이드



구 분	현 상	설 명
제품형태	⊘ 메인매트 엉덩이 부분이 아래쪽으로 많이 처졌어요.	☞ 세라젬 마스터의 매트 커버와 천은 신체의 굴곡과 무게에 따라 늘어나는 재질로 만들어져, 마사지가 최대한 방해받지 않도록 되어 있습니다. 따라서 집에서 연속해서 사용하는 경우, 엉덩이 부분과 같이 인체에서 가장 무거운 부위가 처지는 것은 자연스러운 현상입니다.
제품소리	⊘ 내부 도자 동작 시 소리가 발생해요. 체험 제품보다 소음이 심해요.	☞ 내부도자는 2개의 모터를 통해 수직/수평으로 이동하기 때문에 기본적인 소음을 가지고 있습니다. 매장에서의 제품 체험 시에는 주변 소음으로 인해 느끼지 못하셨으나 집에서 사용하실 때에는 모터의 소리가 크다고 느끼실 수 있습니다.
냄새	⊘ 제품에서 화학약품 냄새가 나요.	☞ 새 제품이라 일시적으로 냄새가 날 수 있습니다. 인체에 전혀 해가 없는 냄새이며 사용하다 보면 금방 사라집니다.
보조부	⊘ 서브 매트를 펼칠 때 소리가 크게나요.	☞ 서브 매트 오픈 시 본체와 서브 매트 높이를 맞추기 위해 발생되는 정상적인 동작 소음입니다. 서브 매트를 천천히 열어 주시면 소리를 줄일 수 있습니다.
리모컨	⊘ 리모컨 사용 후 케이블이 안으로 들어가지 않아요.	☞ 리모컨 케이블이 꼬여 있는지, 중간에 끼어 있지는 않은 지 확인해 주세요. 케이블을 과도하게 당겼을 경우에는 케이블의 컬 부분 사이즈가 커져서 잠시 들어가지 않는 경우가 있으나 일정 시간이 지나면 정상상태로 되돌아 갑니다.
에어 마사지	⊘ 에어 마사지가 허벅지부터 압박해요.	☞ 에어 마사지 연결이 정상적으로 연결 되어 있는지 확인해 주세요. 연결을 반대로 할 경우 허벅지부터 마사지가 진행 될 수 있습니다.

2. 관리 요령 및 보관방법

1 제품 외관은 석유계 제품이기 때문에 아세톤, 볼펜, 휘발유, 신나, 땀, 무스, 스프레이 등 유기성 용제에 치명적이니 노출되지 않도록 주의하세요.

2 평소에 사람의 피부가 직접 닿는 부위는 깨끗한 마른 헝겊으로 닦아 주세요.

3 화장품 종류, 휘발성 유제와의 접촉 시 장시간 경과 후 표면이 벗겨질 수 있으니 신속히 마른 헝겊으로 닦아주세요.

4 겉천 세탁 시 중성세제를 사용하여 반드시 단독 손세탁을 해주세요.

5 뜨거운 것이나 화기를 접할 경우 레자가 오그라드는 성질이 있으므로 각별히 주의해주세요.

6 제품 사용 시 이염 우려가 있는 의류 착용을 피해주세요.
(외부 마찰로 인한 이염의 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다.)

7 직사광선과 습한 곳은 피해주시고 실온에서 보관하세요.
(제품의 변색 및 노후의 원인이 됩니다.)

8 리모컨 케이블이 꼬이지 않게 주의하여 사용해 주세요.

3. A/S 신청 전 확인

리모컨이 켜지지 않나요?

Q : 전원코드가 제대로 연결되었나요?
A : 전원코드를 다시 연결하여 주시기 바랍니다.

Q : 제품 하단의 전원스위치가 켜져 있나요?
A : 전원 스위치를 켜주시기 바랍니다.

복부 진동 도자가 작동되지 않나요?

Q : 복부 진동 도자가 제대로 연결되었나요?
A : 복부 진동 도자를 다시 연결하여 주시기 바랍니다.

제품동작에 이상이 있나요?

Q : 상하 버튼으로 내부 도자가 이동하지 않나요?
A : 집중/반자동/수동모드에서만 상하 버튼을 이용한 내부 도자 이동이 가능합니다

Q : 리모컨의 일부 버튼이 입력되지 않나요?
A : 서브 매트의 상태를 확인해 주시기 바랍니다. 서브 매트가 완전히 열리지 않은 경우 리모컨의 일부 버튼이 입력되지 않습니다.

Q : 서브 매트가 완전하게 닫히지 않나요?
A : 전원코드가 꼽혀있는지 확인하세요. 리모컨의 전원이 켜져있는지 확인하세요.

에어 마사지 모드가 동작하지 않나요?

Q : 에어 호스가 꼬이거나 접히지 않았나요?
A : 에어 호스가 꼬이거나 접히지 않도록 잘 펴주시기 바랍니다.

리모컨 화면에 진단 코드 메시지가 표시되나요?

Q : 리모컨 화면에 진단 코드 메시지가 표시되나요?
A : 진단 코드 메시지를 확인 후 고객센터로 연락 주시기 바랍니다. 절대로 온열기를 임의로 분해해서는 안 됩니다.

USB인식이 잘 되지 않나요?

Q : USB 음원이 재생되지 않나요?
A : 제품에 USB 인식하는데 시간이 필요하오니, 바르게 연결이 되어있는지 확인 후, 잠시만 기다려주십시오.
A : USB안에 재생 가능한 음원이 저장되어 있는지 확인해 주십시오.

4. 진단 코드 메시지





잠깐!

작동 중 리모컨 화면에 다음과 같은 메시지가 나타나면,
반드시 네 자리 숫자를 메모해 두신 후 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.

⚠ 주 의	진단코드 메시지가 표시되면, 확인 후 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.

5. 제품 사양

모 델 명	CGM MB-1701
품 목 명	개인용온열기
제 품 명	MASTER V6
정격전압	AC220V, 50/60Hz
소비전력	480VA
사용환경 온도	10℃~40℃
보관 방법	실온보관
품목 허가	제인 18-4296 호
제조 허가	제 697 호
체형인식 권장 신장	120cm~186cm
재생 가능파일 형식	MP3, WAV
USB 포맷방식	FAT, FAT32
제품치수	펼쳤을 시 : 728mm x 2,044mm x 431mm (±10mm) 닫았을 시 : 728mm x 1,212mm x 431mm (±10mm)
제품중량 (박스무게 포함)	73.6±3kg
사용목적	인체에 열을 가하여 근육통 완화 등에 사용 가능한 개인용온열기와 경미한 근육통의 완화 등을 목적으로 인체에 물리적 에너지 (진동, 충격, 압박 자극 등)를 가하는 기구의 의료용진동기, 혈액이 괴는 것을 방지하거나 혈액 순환이 잘 되도록 주기적으로 슬리브 등을 부풀려 사지를 압박해주는 사지압박순환장치, 그리고 추간판탈출증, 퇴행성 협착증 등의 치료를 목적으로 인체를 견인하는 전동식 장치인 전동식정형용견인장치가 조합된 기기이다.
제 조 원	주식회사 세라젬
기자재 명칭	특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)

* 이 제품은 의료기기입니다.
* 품질 향상을 위해 디자인, 제품 컬러 및 제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 본 제품은 국내 판매용으로 제작된 제품입니다. 따라서 본 제품을 해외로 반출 시에는 어떠한 사후관리도 받을 수 없음을 숙지하시기 바랍니다.
* 앱 마켓에서 '세라젬' 또는 'ceragem' 을 입력하신 후 세라젬에서 제공하는 앱을 다운로드해 주세요.
* 무선 통신은 기기 간 거리(속도), 장애물 및 타 무선 기기 등에 의해 연결이 제한될 수 있습니다.
* 스마트폰 기종 및 소프트웨어 버전에 따라 앱 사용이 제한될 수 있습니다.
  (스마트폰 전용으로 제작됐으며, 태블릿 및 일부 스마트폰 에서 원활하게 작동되지 않을 수 있습니다.)

6. 제품 보증서

보 증 서

· 저희 세라젬은 다음과 같이 제품을 보증합니다.
· 이 보증서는 제품을 최초로 구입한 국가에서만 유효합니다.
· 이 제품은 의료기기이므로 양도나 중고 거래 시 품질 보증 서비스에 제한을 받을 수 있습니다.
· 이 보증서는 재 발행되지 않습니다.
· 세라젬은 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결 기준에 따라 보증합니다.

품목명	개인용온열기	모델명	CGM MB-1701
구입일		제품명	
구입대리점		시리얼넘버	

※ 품질보증기간: 1년(설치일자를 기준으로 기산합니다.)
※ 부품보유기간: 5년(제조일자를 기준으로 기산합니다.)

무상 서비스

일반 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우 보증기간이 반으로 줄어듭니다.
구매 후 제품을 정상적으로 사용했을 때 1년 이내에 발생한 성능 및 기능 이상에 한하여 무상 서비스를 제공합니다. 단, 소비자의 고의적 과실(공인되지 않은 기술자가 제품을 수리하거나 소비자가 임의로 수리 및 개조하여 발생한 고장, 제품의 오용으로 인한 파손 및 고장 등)의 경우에는 무상 서비스를 제공하지 않습니다.

유상 서비스

고장이 아닌 경우
- 이사 또는 제품의 이동 등으로 인한 설치 부실
- 제품 자체의 결함이나 하자가 아닌 사용자 판단에 의한 이상 문의
  ▶가벼운 이음(잡음), 진동, 냄새, 외관, 작동 감각 등

소비자 과실로 고장 난 경우
- 소비자의 설치 및 사용 미숙으로 인한 고장 발생 시
- 제품 오용으로 인한 파손 및 고장 발생 시
- 전기 용량을 잘못 사용하여 고장 발생 시
- 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장 발생 시
- 세라젬에서 지정하지 않은 소모품이나 옵션 제품 사용으로 인한 고장 발생 시
- 세라젬 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 설명서의 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생 시

그 밖의 경우
- 천재지변(홍수, 화재, 지진, 수해, 낙뢰, 전쟁 등)에 의한 고장 발생 시
- 제품을 사용함으로 생기는 자연적인 단순 소모성 부품 교환
  ▶겉천, 도자 커버, 케이블류(복부 진동 도자 케이블, 리모컨 케이블, 메인/서브 연결 케이블, 전원 케이블),에어셀 마사지기, 복부 진동모터, 에어펌프, 레자류 등

* 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 사용설명서를 꼼꼼히 읽어주시기 바랍니다.
* 이 보증서는 제품을 구매한 국가에만 제공되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주시기 바랍니다.

CERAGEM

주식회사 세라젬

CERAGEM

본사/공장	충남 천안시 서북구 성거읍 정자 1길 10
고객센터	1577-5570
홈페이지	http://www.ceragem.co.kr